



SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 6000 SILICONE

Indicado para administração de dietas gástricas, enterais e/ou jejunal em pacientes que estejam impossibilitados de se alimentar por via oral.

- Fabricada em Silicone e possui tubo radiopaco com duas marcações de posicionamento.
- Possui conector proximal de silicone na cor lilás com dupla derivação (formato Y) que se ajusta facilmente a todos os tipos de equipo de alimentação enteral;
- Ponteira distal de peso, obtido pela adição de Tungstênio em pó ao silicone para facilitar a migração e sua sustentação no estômago/ duodeno;
- Fio guia de inserção fornecido lubrificado a base de silicone;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).

DISPONÍVEL NAS VERSÕES


CÓDIGO	MODELO	DIÂMETRO / COMPRIMENTO
95600	Neonatal	05Fr / 40 cm
95601	Pediátrica	06Fr / 60 cm
95602	Infantil	08 Fr / 60 cm

Registro Anvisa: 80020550062

Data Sheet Sonda para Alimentação Enteral 6000 Silicone Medicone

Registro Anvisa: 8002059003

Data Sheet Sonda 6010 5Fr

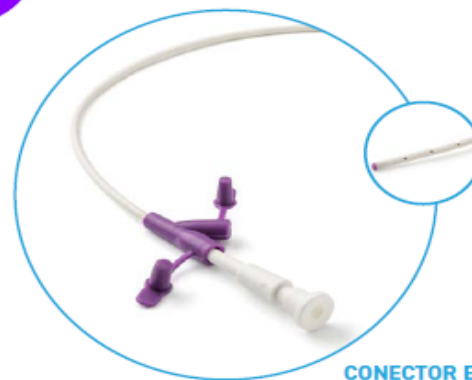

CONECTOR E MARCAÇÃO