



KIT BUTTON PARA GASTROSTOMIA M-NUTRI

Sua indicação de uso destina-se a pacientes que foram submetidos à gastrostomia endoscópica percutânea, para alimentação por períodos extensos, havendo então a necessidade de trocas da sonda ao longo da vida. Também são utilizadas para descompressão gástrica. O Button para Gastrostomia possui como princípio de funcionamento a geração da comunicação externa até o estomado do paciente de forma a permitir administração de dietas e é uma alternativa de substituição para uma sonda de gastrostomia convencional, pois proporciona maior conforto e liberdade ao paciente, pois suas vias de acesso ficam niveladas com a pele.

O KIT BUTTON PARA GASTROSTOMIA M-NUTRI É COMPOSTO POR:

Sonda de alimentação enteral de reposição de baixo perfil:


- 01 Button para Gastrostomia;

Componentes utilizados na inserção do Button no abdômen do paciente:

- 01 introdutor, 01 seringa luer slip e gases;

Componentes utilizados durante a administração da alimentação:

- 01 extensor com duas vias, 01 extensor universal para alimentação em bolo e 01 seringa bico cateter;

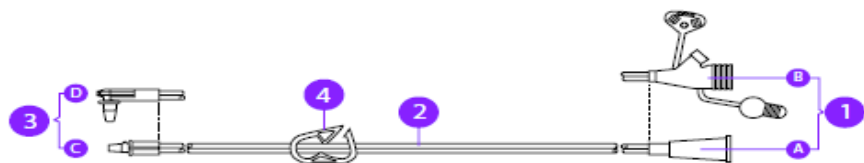


Registro Anvisa: 80020550059

Referência: Data Sheet e Instrução de uso do Kit Button para Gastrostomia M-Nutri Medicone



ITEM	DESCRIÇÃO
A	Seringa Luer Slip
B	Seringa Bico Cateter
C	Gazes
D	Introdutor
E	Button para Gastrostomia
F	Extensores

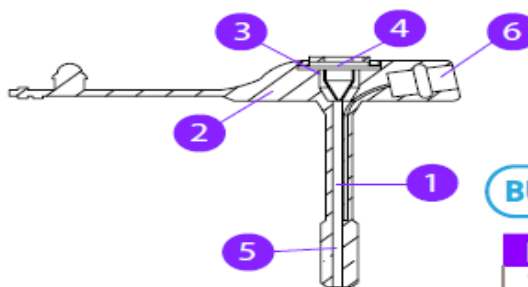

BUTTON GASTROSTOMIA

PARTE	DESCRIÇÃO
1	Eixo (Tubo)
2	Corpo do button
3	Válvula bico-de-pato
4	Anel conector
5	Balão
6	Válvula de retenção

EXTENSORES (ACESSÓRIOS)

PARTE	DESCRIÇÃO
1 A	Adaptador Universal (Bolus)
1 B	Adaptador 2 vias
2	Tubo
3 C	Conector reto
3 D	Conector ângulo reto
4	Clamp