




SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 5000 POLIURETANO

Indicado para administração de dietas gástricas, enterais e/ou jejunal em pacientes que estejam impossibilitados de se alimentar por via oral.

- Constituída por tubo 100% Poliuretano branco radiopaco. Facilitado visualização no raio-x.
- Conector proximal lilás em dupla derivação (formato Y) que se ajusta facilmente. Com encaixe em todos os tipos de equipamentos para alimentação enteral.
- Fio guia de Condução Inox AISI304. Fornecido já lubrificado.
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).

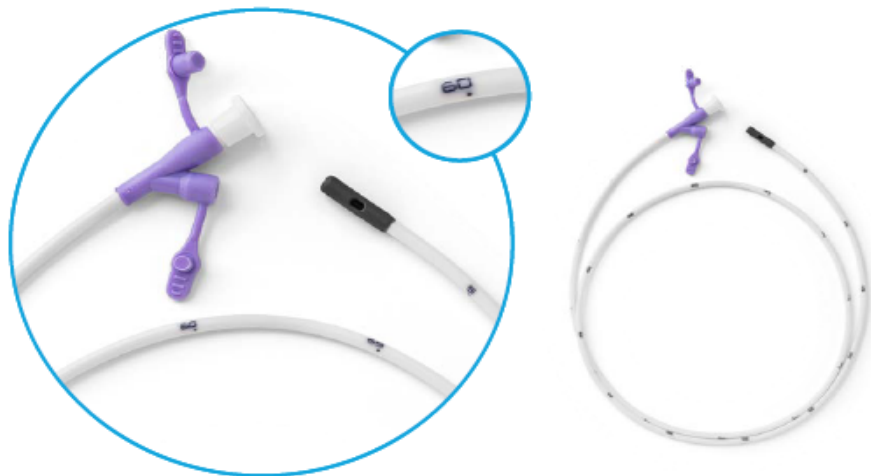

GRADUAÇÃO AO LONGO DO TUBO

Nº Registro: 80020550040

Referências:

Ficha técnica Sonda para Alimentação Enteral 5000 Poliuretano - M4

Imagens gráficas do produto



✚ **GRADUAÇÃO AO LONGO DO TUBO:**
Para indicar posição da ponteira no momento da introdução e auxiliar na avaliação de possíveis deslocamentos.

✚ **PONTEIRA DISTAL DE PESO:**
Obtida pela adição de Tungstênio em pó ao Poliuretano, facilitando migração e sustentação no estômago/duodeno.

✚ **PONTEIRA DISTAL COM ORIFÍCIOS LATERAIS:**
A ponteira distal possui sua ponta aberta e tem dois orifícios laterais, desencontrados.

✚ **FIO GUIA DE INSERÇÃO:**
Fabricado em aço inoxidável lubrificado.



DISPONÍVEL NAS VERSÕES

CÓDIGO	MODELO	DIÂMETRO / COMPRIMENTO
94971	Pediátrica	06Fr / 60 cm
94972	Infantil	08Fr / 60 cm
94973	Adulto	08Fr / 105 cm
94974	Adulto	10Fr / 105 cm
94975	Adulto	12Fr / 120 cm